


Doctor Vida
Your pocket PCR



Teste COVID-19

COVID-19 assay / Prueba COVID-19

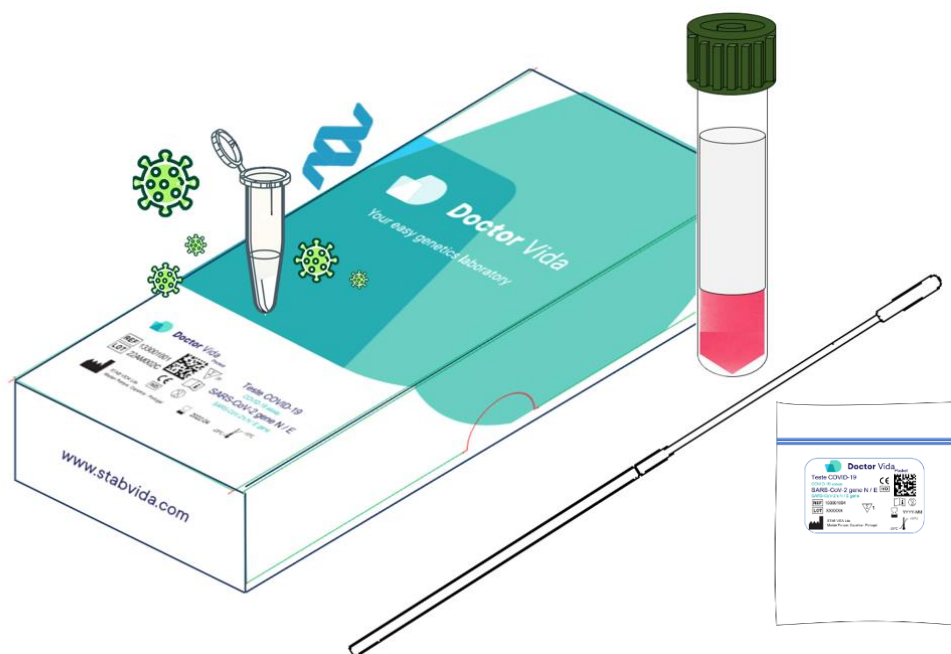

Ficha de informação

Datasheet / Ficha de información



Referência / Reference / Referencia: 133001001/133001004

Versão / Version / Versión: 4, setembro / september / septiembre 2023

Dispositivo médico para diagnóstico *In Vitro* / In Vitro Diagnostic Medical Device /
Producto sanitario para diagnóstico *in Vitro*

stabvida.com

Descrição

O teste COVID-19 é uma mistura de reagentes que permite a amplificação específica dos genes N e E do vírus SARS-CoV-2 numa reação LAMP em tempo real por medição de fluorescência. O teste deve ser utilizado em combinação com o equipamento Doctor Vida (ref. 133001002) e a aplicação de telemóvel Dr Vida Pocket PCR (ref. 133001003).

Utilização esperada

O teste COVID-19 é compatível com amostra de exsudado da nasofaringe colhida em Meio de Preservação Viral ou RNA puro. O sistema só deve ser utilizado por profissionais de saúde. O utilizador é responsável pela análise da amostra e pelo cumprimento dos procedimentos de biossegurança, incluindo a utilização de equipamento de proteção individual necessário, manutenção das instalações e gestão de resíduos.

Description

The COVID-19 test is a mixture of reagents used to amplify the SARS-CoV-2 virus-specific N and E genes in a real-time LAMP reaction by fluorescence measurement. The COVID-19 test must be used in combination with the Doctor Vida device (ref. 133001002) and the Doctor Vida mobile application (ref. 133001003).

Indications for Use

The COVID-19 test is compatible with a direct swab nasopharyngeal collected in Viral Preservation Medium or pure RNA. The system is only to be used by healthcare professionals. The user is responsible for the sample analysis and compliance with the biosafety procedures, including the use of individual protection equipment required, facilities maintenance and waste management.

Descripción

La prueba COVID-19 es una mezcla de reactivos que permite la amplificación específica de los genes N y E del virus SARS-CoV-2 en una reacción LAMP en tiempo real mediante medición de fluorescencia. La prueba debe utilizarse en combinación con el dispositivo Doctor Vida (ref. 133001002) y la aplicación para teléfono móvil Dr. Vida Pocket PCR (ref. 133001003).

Uso esperado

La prueba COVID-19 es compatible con un hisopo nasofaríngeo directo recogido en medio de preservación viral o ARN puro. El sistema solo debe ser utilizado por profesionales de la salud. El usuario es responsable del análisis de la muestra y del cumplimiento de los procedimientos de bioseguridad, incluido el uso de los equipos de protección individual requeridos, el mantenimiento de las instalaciones y la gestión de residuos.

Conteúdo da embalagem / Packaging content / Contenido del empaque

Formato disponível Available format Formato disponible	Referência Reference Referencia	Descrição Description Descripción	Temperatura de armazenamento Storage temperature Condiciones de almacenamiento
Teste individual Single package Empaque individual	133001004	A caixa contém 1 testes. Uso único. The box contains 1 test. Single use El empaque contiene.1 tubo de prueba. Uso único	-20°C
Caixa de 20 testes 20 tests box Caja con 20 tubos de prueba	133001001	A caixa contém 20 testes. Uso único. The box contains 20 tests. Single use. El empaque contiene.20 tubos de prueba. Uso único	-20°C

Encomenda de produtos complementares / Order of complementary products / Pedido de productos complementares

Produto Product Producto	Referência Reference Referencia	Temperatura de armazenamento Storage temperature Condiciones de almacenamiento
Equipamento Doctor Vida Doctor Vida device Equipo Doctor Vida	133001002	15 - 30°C
Aplicação de telemóvel Dr Vida Pocket PCR (compatível com sistemas iOS e Android) Dr Vida mobile application (compatible with iOS and Android systems) Aplicación móvil Dr Vida Pocket PCR (compatible con sistemas iOS y Android)	133001003	Não aplicável Not applicable No applicable

Informações do fabricante / Manufacturer information / Información del fabricante

Se precisar de mais informações, entre em contato com nosso suporte técnico por e-mail drvida@stabvida.com ou telefone (+351) 210438606.

If you require more information, please contact our technical support by email drvida@stabvida.com or phone (+351) 210438606.

Si necesita más información, póngase en contacto con nuestro soporte técnico por correo electrónico drvida@stabvida.com o por teléfono PT (+351) 210438606.